

# Oxivir Excel Wipes Acti

Rengörings- och desinfektionsdukar för ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter och för hårda ytor


## Produktbeskrivning

Oxivir Excel Wipes Acti, med AHP-teknik, är det perfekta valet för rengöring och desinfektion i ett steg. En färdig användbar våtservett för alla användningsområden för rengöring och desinfektion av hårda ytor samt för ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter (endast för professionellt bruk).

## Produktegenskaper

- Färdig att använda våtservett, idealisk produkt för alla användningsområden, inklusive hälso- och sjukvårdsområden, icke-hälso- och sjukvårdsområden och livsmedelssektorer
- Fullständigt virusdödande.
- Snabb avdödning av ett brett spektrum av virus, bakterier och jästsvampar.
- Överlägsen rengöring med högpresterande tensidsystem.
- Doftfri.
- Ingen sköljning krävs.
- Bryts aktivt ned till vatten och syre.
- BPR-godkänd biocid.
- Certifierad medicinteknisk produkt.


**CE**  
**0044**

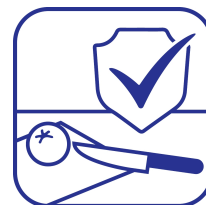

 **Diversey Europe  
Operations B.V.**  
De Corridor 4,  
3621 ZB Breukelen,  
The Netherlands.  
[www.solenis.com](http://www.solenis.com)



**BPR**  
APPROVED

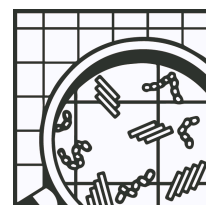

© A.I.S.E

# Oxivir Excel Wipes Acti

## Produktfördelar

- Oxivir Excel Wipes Acti har bredspektrumseffekt mot bakterier, jästsvampar och virus vid korta kontakttider och ger högsta möjliga desinfektion mot flera farliga patogener.
- BPR-godkänt och omfattande testat enligt europeiska normer.
- Oxivir Excel Wipes Acti har en fullständig virucidal effekt, inklusive bevisad effektivitet mot icke-höljeförsedda virus såsom polio, adeno, murint norovirus och höljeförsedda virus såsom coronavirus, vacciniavirus, HIV, HBV, HCV och influensa.
- Oxivir Excel Wipes Acti har en stark rengöringsförmåga tack vare de kraftfulla tensiderna, vilket gör det till inte bara ett utmärkt desinfektionsmedel utan också ett utmärkt rengöringsmedel.
- AHP-formuleringen är skonsam mot ytor, förlänger utrustningens livslängd och lämnar inga hårda rester på ytan.
- Oxivir Excel Wipes Acti är lämpligt för daglig rengöring och desinfektion av hårda ytor samt för användning i områden med hög beröringsfrekvens inom detaljhandel, utbildning, livsmedelsservice, långvård och andra sektorer, samt i högriskområden på sjukhus såsom operationssalar, intensivvårdsavdelningar, neonatalintensivvårdsavdelningar och patientrum.
- Inga krav på personlig skyddsutrustning, såvida det inte är för långvarig användning.

## Bruksanvisning

Klar att använda, ingen utspädning behövs, använd vid rumstemperatur:

- Ta bort grov smuts.
- Öppna locket, ta en enda servett och stäng locket.
- Applicera produkten genom att fukta den icke-porösa ytan och/eller den icke-invasiva medicinska anordningen helt.
- Låt verka i 5 minuter.
- Låt lufttorka. Ytan behöver inte sköljas.
- Tvätta händerna efter hantering.

Appliceringsmängd: 1,6 m<sup>2</sup> per torkning.

## Teknisk information

Utseende:	Vit våtservett
Lukt:	Neutral
pH koncentration:	≈ 1.95
Relativ densitet (20°C):	≈ 1
Hållbarhet:	2 år efter tillverkning (Sista förbrukningsdag: se förpackningen) 28 dagar efter öppnandet
Aktiv ingrediens:	0,36% väteperoxid

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

# Oxivir Excel Wipes Acti

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och avfallshantering av denna produkt finns i ett separat säkerhetsdatablad, [sds.solenis.com](https://sds.solenis.com). Hantera enligt god industriell hygien och säkerhetspraxis. Hålls borta från mat, dryck och djurfoder. Blanda inte med andra produkter om inte Diversey ger råd om detta. Förvaras i slutna originalförpackningar och ska hållas borta från extrema temperaturförhållanden. Produkten är inte avsedd att återanvändas. Endast för professionella användare/specialister.

## Varning

Förvara inom följande temperaturintervall: 6 °C – 35 °C. Använd inte om förpackningen är skadad. Förvara skyddat från solljus. Hantera enligt god industriell hygien och säkerhetsrutiner. Förvara åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder. Produkten är inte avsedd att återanvändas. Förvaras oåtkomligt för barn och djur som inte är avsedda som målgrupp. Varning: Kan vara frätande för metaller.

## Personlig skyddsutrustning

Fullständig information om personlig skyddsutrustning för denna produkt finns i ett separat säkerhetsdatablad; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

**Personlig skyddsutrustning:** Använd personlig skyddsutrustning enligt behov. **Handskydd:** Skölj och torka händerna efter användning. Vid långvarig kontakt kan hudskydd vara nödvändigt.

## Avfallshantering

Fullständig vägledning om avfallshantering av denna produkt finns i ett separat säkerhetsdatablad; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

## Att beakta

Oxivir Excel Wipes Acti är avsett för användning som desinfektionsmedel på hårda ytor, inklusive hårda ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter. Under rekommenderade användningsförhållanden är Oxivir Excel Wipes Acti lämpligt för användning på ytor såsom rostfritt stål, krom, vinyl, nylontyger, laminerade ytor, glas, gummi, hårda och flexibla plaster (polypropen, polyuretan, polyeten, PVC-akryl, glasfiber och polykarbonat). Användning för andra ändamål än de som anges rekommenderas inte. Oxivir Excel Wipes Acti är inte avsett för användning på invasiva medicintekniska produkter. **Blanda inte med andra produkter. Ej avsett för porösa eller syrakänsliga ytor.**

## Mikrobiologisk information

**Användningsområde : PT2 Sjukvård under smutsiga förhållanden, PT2 Icke-sjukvård under smutsiga förhållanden & PT4 Ytor i kontakt med livsmedel under smutsiga förhållanden**

Användning	Krav	EN Norm	Organismer	Utspädning	Kontaktid
Torkning	Bakteriedödande	EN 13727 EN 1276 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	RTU	5 min
	Yeasticidal	EN 13624 EN 1650 EN 16615	C. albicans		
	Virucidal	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

## Miljöinformation

De tensider som används i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med kraven i EU:s tvättmedelsförordning, EG 648/2004.

# Oxivir Excel Wipes Acti

## Godkännanden

- Biocid: BPR EU-0032483-0003 1-3
- Anmäld organ för medicintekniska produkter: CE0044

## Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
9316225	OXIVIR EXCEL WIPES ACTI 12X100PC W4940	Wipes

[www.solenis.com](http://www.solenis.com)

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.27/03/2026 sv-SE (K02979)